



JMKdent
ortodoncja u specjalisty

☞ Kompasowa 1/49, Warszawa ☎ +48 22 401 21 22

✉ info@jmkdent.pl 🌐 www.jmkdent.pl

APARAT PENDEX

Ty lub Twoje dziecko właśnie otrzymało aparat Pendex. To aparat przyklejany i zaprojektowany tak, by poszerzać szczękę i przesuwać do tyłu trzonowce. To służy skorygowaniu stłoczenia i w niektórych przypadkach wychylenia przednich zębów.


Aparat jest początkowo rozkręcany raz dziennie przez okres 3-4 tygodni. W zależności od ciężkości wady lekarz może zwiększyć lub zmniejszyć ilość obrotów. Po zakończeniu rozkręcania pozostałe aktywacje wykonane będą przez ortodontę celem przesuwania trzonowców do tyłu (dystalizacji).

Aby rozkręcić aparat użyj kluczyka i zrotuj go o ok. 1/4 obrotu do tyłu i w dół w kierunku gardła. Popchnij kluczyk aż do momentu, gdy pojawi się następny otwór, potem usuń kluczyk kierując go w dół do języka. Rozkręcaj aparat raz dziennie wieczorem przez ustaloną ilość dni. W czasie rozkręcania może być odczuwany nieznaczny ucisk w postawie nosa lub w górnych zębach. Po ok. tygodniu może pojawić się przestrzeń między zębami przednimi. Normą jest zamykanie się tej przestrzeni po kilku kolejnych tygodniach gdy włókna ozębnej spowodują zbliżenie się do siebie zębów przednich.


Aparat Pendex jest zwykle pozostawiany na okres 6 miesięcy i po jego usunięciu montowany jest łuk podniebienny sam, lub wraz ze stałym aparatem ortodontycznym jeśli są obecne zęby stałe i wiek pacjenta na to pozwala. Tak jak w przypadku każdego nowego aparatu na początku występuje okres dopasowania się i przyzwyczajania.

PRZYDATNE WSKAZÓWKI TO:


1. Zachowywanie bardzo dobrej higieny (stosowanie irygatora pomaga zachować czystość pod aparatem, ponieważ fragmenty jedzenia mają tendencję odkładać się dookoła śruby);
2. Okresowa nadwrażliwość zębów może wystąpić w ciągu 2-5 dni od naklejenia aparatu i po każdej aktywacji. Można wtedy zastosować ibuprofen lub inny analgetyk;
3. Jeśli aparat poluzował się lub pojawił się ból prosimy skontaktować się z gabinetem.

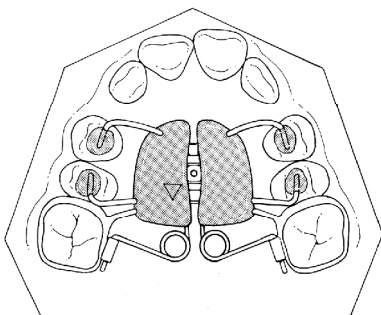


STAN W MOMENCIE NAKLEJENIA APARATU

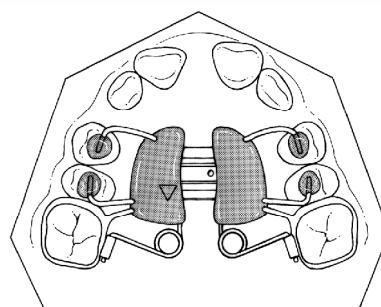


PO ROZSZERZENIU

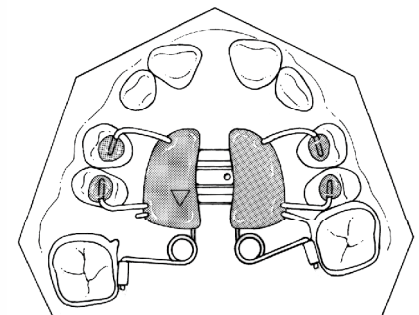

PO PIERWSZEJ AKTYWACJI

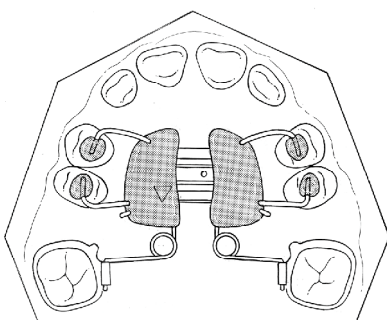

PO DRUGIEJ AKTYWACJI

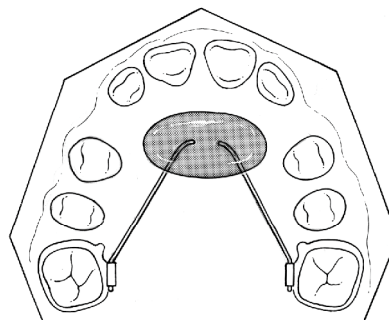

EFEKT KOŃCOWY